


MANI®

FOR ADVANCED TREATMENT

SMOOTH BROACHES BARBED BROACHES

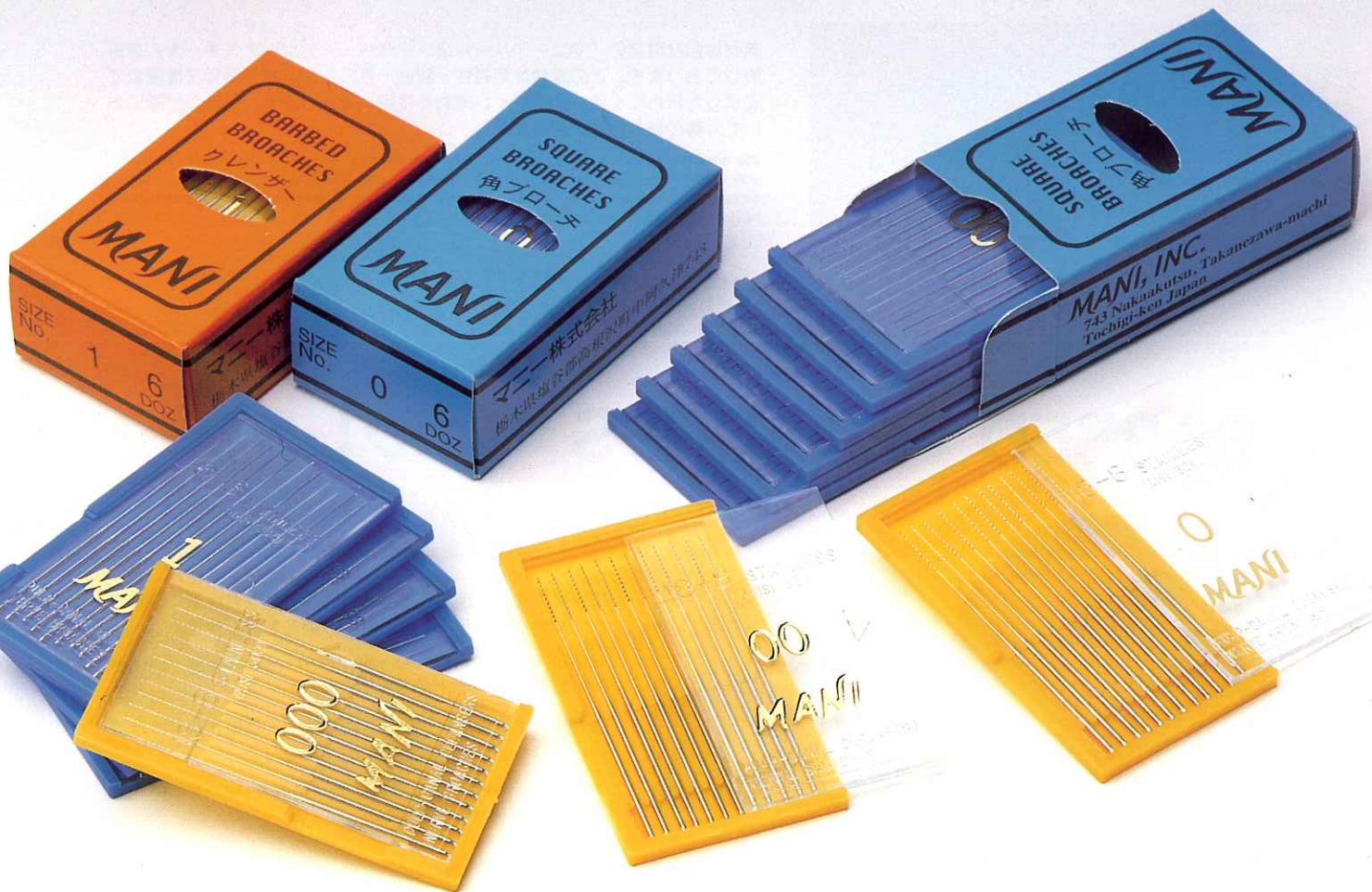


MANI, INC.



For advanced treatment — We serve with micro processing technology

SMOOTH BROACHES

角ブローチ

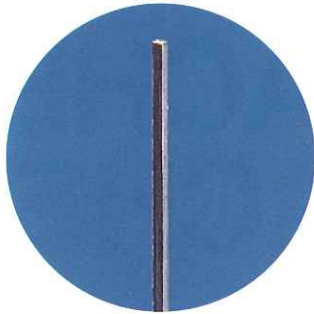


特殊ラッピング加工により、先部は鋭いエッジがついた正四角形。そのためワッテが巻きやすくなっています。また表面は、鏡面仕上げのためワッテを根管内に残留させやすい特徴を持っています。

By special lapping process, this barbed broach has a regular square cross-section with sharp edge at its tip. This portion can easily wind a wad of absorbent cotton. Also, since the surface is finished like a mirror, a wad of cotton can easily be left in the root canal.

ワッテを巻きつけ根管清掃時の吸湿や根管消毒のために根管への消毒薬を運搬するのに便利です。また、根管口を探索したり方向を確認したり、ときには根管の長さを測る根管の探針としての役目もはたします。

This smooth broach is useful for absorbing moisture in the root canal and for carrying disinfectant. Also, this instrument can be used as a pathfinder or a probe in the root canal.

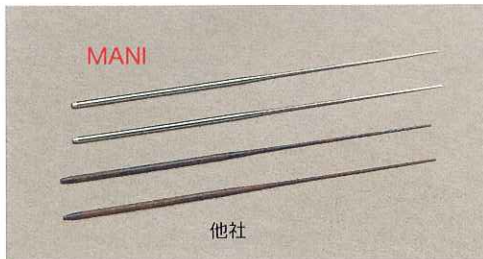



素材は自社開発の「マニー・ハードファイバー・ステンレススチール」を採用しております。この線材は耐蝕性・靱性・硬度の相反する要素を極限まで追求した折れにくく、錆びにくい線材を使用しております。日常の診療において写真のような錆は発生しません。

We adopted "MANI hard-fiber stainless steel" as the raw material of this instrument. This wire-material has superior anti-corrosion, elasticity and hardness features which are ordinarily disagreed, and it does not break & corrode easily. Rust such as left photograph is never occurred with our instrument.

サビませんか？

BARBED BROACHES

クレンザー

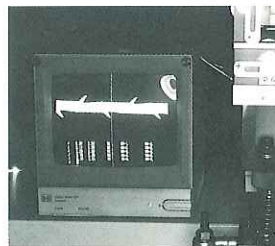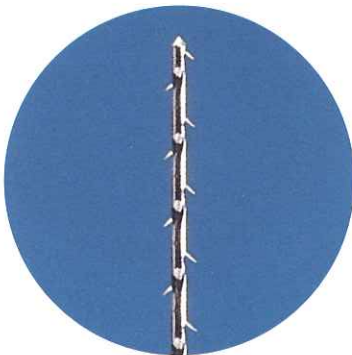

クレンザー自動検査装置


特殊加工と画像処理を組み合わせた自動検査装置に裏打ちされた均一な棘が、精度の高い治療を保証します。

Uniform barbs processed and inspected by special image-processing machine assure your high quality treatment.

弾力性に富み歯髄やワッテなど根管内の残留物をひっかけ、抜き取りやすい形状の棘がついています。

This barbed broach is fully elastic, and has barbs by which debris & residues are easily pulled out.


SMOOTH BROACHES

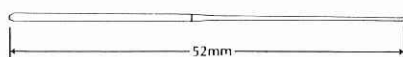

Lengths(L) : 52mm
Packed : 12pcs. to a package
Packing : 6 packages per box

SIZE	
000	XXX Fine
00	XX Fine
0	X Fine
1	Fine
2	Medium
3	Coarse

BARBED BROACHES

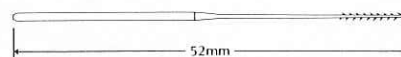

Lengths(L) : 52mm
Packed : 12pcs. to a package
Packing : 6 packages per box

SIZE	
000	XXX Fine
00	XX Fine
0	X Fine
1	Fine
2	Medium
3	Coarse



クレンザー・角ブローチのご使用に際して ●本製品を歯科治療以外の目的には使用しないで下さい。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●予め患者の口腔外で変形・キズ・ヒビ等が無いか確認して下さい。●ご使用後は医療用廃棄物として適切な処理をして下さい。

デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 □ 1410960610

MANI
MANI, INC. マニー株式会社

本社工場 ■〒329-12 栃木県塩谷郡高根沢町中阿久津743 Tel: 028-675-1511代 [栃用第13号 / 栃用輸第12号]
【 歯科営業 】 Tel: 028-675-3931 / Fax: 028-675-4256
清原工場 ■〒321-32 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 Tel: 028-667-1811代 [栃用第133号]
743 NAKAOKUTSU TAKANEZAWA-MACHI TOCHIGI-KEN, 329-12 JAPAN
Exp. Sec. / Phone : 028-675-3311 Telefax : 028-675-4256 Telex : 3522317 MANI J