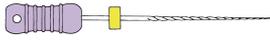
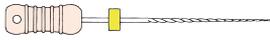
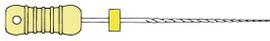
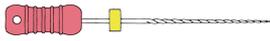
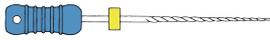
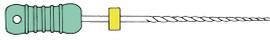


中間リーマ


医療機器届出番号 09B1X0006010010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用根管リーマ
 販売名 マニーリーマ

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#12～37 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
12	0.12	
17	0.17	
22	0.22	
27	0.27	
32	0.32	
37	0.37	


ラバーストッパー：21mm ▷ 25mm ▶

■ 作業部長 (L)

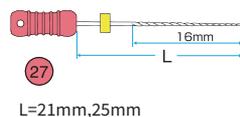

■ 使用方法

リーミング (reaming)
 1/4 ～ 1/2 回転切削

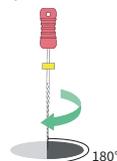

■ 刃部拡大図



■ 横断面形状

12 ～ 37

■ 用途

根管の拡大形成や創傷清拭
 などに使用

リーミング(reaming)

回転操作 (1/4 ～ 1/3 回転) によって、根管壁を切削し、拡大する操作。

中間サイズの役割

リーマは、ISO 規格に基づいて造られております。ISO 規格のファイルは、太みの変化率が大いところで50%になります。ファイルへの負荷を軽減させる為に、ISO 規格ファイルの間に中間サイズを使用する事で、よりスムーズな根管拡大が行えます。

● ● ● 関連商品 ● ● ●

リーマより穿通力を求めるには...

D ファインダー  ...P21

エンジンタイプは...

エンジンリーマ  ...P24

■ 標準価格 (6本入)

#10～40	#06, #08, #45～80	#90～140	中間リーマファイル #12～37
¥2,000	¥2,500	¥3,100	¥3,100