

RT ファイル


医療機器届出番号 09B1X00006011040
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
 販売名 マニー RT ファイル

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#15~40, #45~80 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	
45	0.45	
50	0.50	
55	0.55	
60	0.60	
70	0.70	
80	0.80	

ラバーSTOPパー：21mm □ 25mm ■ 28mm ■ 31mm ■


■ 作業部長 (L)

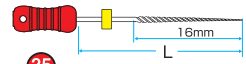

L=21mm, 25mm, 28mm, 31mm

■ 使用方法


リーミング (reaming) 1/4 回転切削 +
 ファイリング (filing) 牽引切削

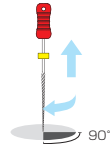

■ 刃部拡大図




■ 横断面形状

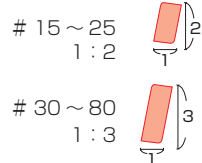


■ 用途

根管の拡大形成などに使用

弯曲根管治療に有効なファイル

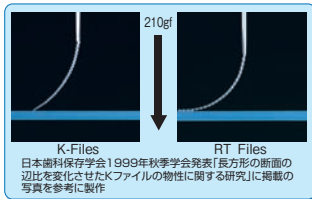

柔軟性比較

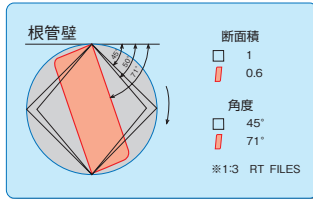

断面積と刃の当たる角度

柔軟性

マニーK ファイルよりも柔軟であるため、特に弯曲根管に威力を発揮します。

切削力

RT ファイルはマニーK ファイルに比べ約1.5倍の切削力。(当社比)

耐破断性

破断するまでの角度が大きく折れにくい。