


フレアーファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011030
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
 販売名 マニー F ファイル

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#15~40 ■材質：ステンレススチール ■テーバー：5/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	
45	0.45	
50	0.50	
55	0.55	
60	0.60	


■作業部長 (L)

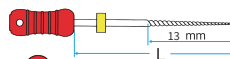


L=21mm,25mm

■使用方法

リーミング (reaming) 1/4 回転切削 +
 ファイリング (filing) 牽引切削

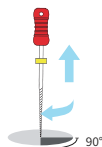

■刃部拡大図

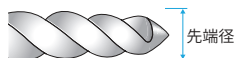

■横断面形状

#12 ~ 60 ▲

■用途


根管の拡大形成などに使用

中間フレアーファイル

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#12~37
 ■材質：ステンレススチール ■テーバー：5/100

サイズ	先端径 (mm)	
12	0.12	
17	0.17	
22	0.22	
27	0.27	
32	0.32	
37	0.37	

ラバーストッパー：21mm □ 25mm ■

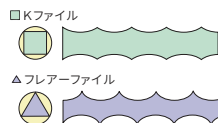

中間サイズの役割

ファイルへの負担を軽減させる為に、中間サイズを使用することでよりスムーズな根管拡大が行えます。

■標準価格 (6本入)

#12 ~ 37、#15 ~ 60

¥3,100