

MANI®

FOR ADVANCED TREATMENT

ENGINE REAMERS, ENGINE H-FILES



MANI, INC.



For advanced treatment — We serve with micro processing technology

より効率的な歯科治療を実現する。

ENGINE REAMERS, ENGINE H-FILES

エンジンリーマ, エンジンH-ファイル

MANIは歯科治療器具として要求される苛酷な条件をいかに克服するか、その治療の増大、高度化、微細化する現実をミクロンをテーマにみつめてきました。

How can MANI fulfill the strict requirements for endodontic instruments? MANI, aware of the increasing demand for highly advanced and precise endodontic therapy, has devoted its advanced business methods and precision engineering know-how to develop its new advanced MICRON theme of endodontic instruments.



●ケースはスライド式

Every instrument can be easily removed with one hand. スライドさせて1本、1本取り出すことができます。シンプルな無駄のないケース。

You can take out any piece of instruments by sliding the lid of the package with only one hand.

●シャープなエッジと鏡面仕上げ

Sharp edge and mirror like finish. 完全な鋭い切れ刃。表面は特許ラッピング加工により鏡面に仕上がっております。 Flawless edges and mirror like finishing are applied to the surface by MANI original method.

●カラーによる識別性 Color coding.

シャック部にISO規格にもとづいた太み別の色分けがされていて、識別が容易です。 Diametric size of reamers and H-files are identified by color coding of the shank conforming to the I.S.O. specifications.

●ステンレスシャックに溝表示 Identification by groove(s).

シャック部に見やすい溝が彫ってあります。オートクレーブはもちろん熱や薬液に侵されません。 The size of reamers and H-files can be easily identified with the number of grooves in the shank. The shank withstands repeated autoclave, dry heat sterilization and medical solution without discoloration and deformation.


根管拡大 に威力を発揮。

自社開発の「マニー・ハードファイバー・ステンレス・スチール」を採用。耐蝕性、靱性、硬度の相反する要素を極限まで追求した折れにくく、さびにくい材質です。詰まったセメント、ガッターパーチャーポイントを取り除くのに最適です。石灰化した根管などに10番などを使用しますとスバラシイ効果を発揮いたします。

MANI adopted "MANI hardfiber stainless steel" developed by our own effort because of its excellent corrosion resistance, ductility and hardness. Engine reamers and H-files are suited to extract stuffed cement or gutta percha point in canal and very much effective in preparing calcitified canals, especially with size 10.


ENGINE REAMERS, ENGINE H-FILES

REAMERS

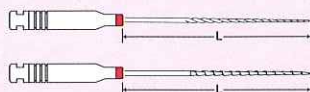

Length (L) : 21,25,※28mm
Packed : 6 pcs. to a package
Size : (a)6 pcs.of one size
(b)Assorted 15(1)-40(6), 45(7)-80(12)

H-FILES

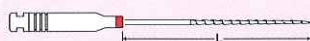

SIZE	Color	Groove(s)
10 (0)		-
15 (1)		1
20 (2)		2
25 (3)		3
30 (4)		4

SIZE	Color	Groove(s)
35 (5)		5
40 (6)		6
45 (7)		1
50 (8)		2
55 (9)		3

SIZE	Color	Groove(s)
60 (10)		4
70 (11)		5
80 (12)		6

※ REAMERS Only



エンジンリーマ、エンジンH-ファイルのご使用に際して ●本製品を歯科治療以外の目的には使用しないで下さい。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●ハンドピースメーカーの指示に従って、シャックを確実に奥まで挿入し、半チャックでないこと、また予め患者の口腔外でキズ・ヒビ及び回転させて振れ・変形等が無いことを確認し、無負荷で回転させ、定常回転となつてからご使用下さい。●破折の原因となりますので、最大許容回転数(800rpm)を厳守してください。●エンジンH-ファイルはツイストコントラアングルヘッド専用ファイルです。●ご使用後は医療用廃棄物として適切な処理をして下さい。

デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 D 0410960410



本社工場 ■〒329-12 栃木県塩谷郡高根沢町中阿久津743 Tel: 028-675-1511代 [栃用第13号 / 栃用輸第12号]
 [歯科営業] Tel: 028-675-3931 / Fax: 028-675-4256
 清原工場 ■〒321-32 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 Tel: 028-667-1811代 [栃用第133号]
 743 NAKAAKUTSU TAKANEZAWA-MACHI TOCHIGI-KEN, 329-12 JAPAN
 Exp.Sec./Phone: 028-675-3311 Telefax: 028-675-4256 Telex: 3522317 MANI J